



GELİŞMİŞ YARA YÖNETİM SİSTEMİ - NPWT
NEW CASE

TOPIVAC

NEGATİF BASINÇ TOPIKAL VAKUM

YARA BAKIM TEDAVİ CİHAZLARI & SETLERİ

TOPI MOBILE DISPOSABLE NPWT YARA TEDAVİ CİHAZLARI & SETİ

TOPI A100 MOBILE DISPOSABLE CİHAZ DAHİL,
5'Lİ KLASİK PANSUMAN SET TAKIMI



3 farklı vakum modu;

-75 mmHg -100 mmHg -125 mmHg

TOPI A200 MOBILE DISPOSABLE CİHAZ DAHİL,
5'Lİ İNSİZYON PANSUMAN SET TAKIMI



3 farklı vakum modu;

-35 mmHg -50 mmHg -65 mmHg

Tek hasta kullanımına yönelik tasarlanmış, tek tedavi protokollü negatif basınçlı bir yara tedavisidir.

Negatif basınçlı yara kapama sistemi, mikropiller dolaşımı artırarak doku iyileşmesini hızlandırır.

Cihaz ve pansuman seti birbiri ile uyumlu ve bütünleşik çalışır.

Sistem, hasta tedavi konforunu en üst seviyeye çıkaran aktif bir yara tedavi sistemi olup kompakt ve ergonomik mobil yapısı (bir cep telefonu büyüklüğünde) ile hastalara yara tedavi süreçlerinde günlük yaşantılarından, hareketliliklerinden kopmadan kaliteli yaşam ve hareket konforu sunar.

Yaraları hızlı ve etkili bir şekilde iyileştirirken uygulama kolaylığı ile uzman personel ihtiyacını azaltarak hastalara evde yara bakım kolaylığı ve mobilite sağlar, hastane yatışlarını azaltır, tedavi masraflarını düşürür ve sağlık hizmetlerinin daha verimli ve yaygın sunulmasını sağlar.

TOPI A100 ve A200, cihaz için özel üretilmiş, yaralı bölgeye uygulanan pansuman seti vasıtasıyla eksüdayı sürekli olarak yarıdan çeker, negatif basıncın eşit dağıtılmasını sağlar. Granülasyonu oluşturarak yarayı iyileştirilir. A100'den farklı olarak A200 insizyon (ameliyat sonrası kesi yarası) sonrası kullanıma yönelik tasarlanmıştır. Vakum değerleri daha düşük olup kesi yaralarına özgü özel medikal süngeri ile dikişlere zarar vermeden kesi kenarlarını bir arada tutarken yaranın hızlı iyileşmesini sağlar ve estetik olarak yara izinin önlenmesine de yardımcı olur.



Pratik ve Kolay Kullanım

- Tek tuşla tedaviye başlama ve bitirme kolaylığı.



Görsel & Sesli Uyarı Sistemi

- Görsel & sesli uyarı sistemi ile yüksek güvenlik.
(Vakum kaçağı, dolu canister ve düşük pil seviyesi esnasında anında uyarı)



Kullanıcı Dostu

- Sıfır çapraz bulaşma riski.
- Önleyici bakım için sıfır maliyet.
- Etkin eksüda yönetimi için canister bazlı sistem.
- Vücuda takma veya asma kolaylığına sahip, kıyafetlerin altına gizlenebilen, **sosyal yaşantınıza kimse fark etmeden kesintisiz devam etmenize yardımcı** küçük hafif tasarım.
- Terapi sırasında sessiz çalışmaya izin veren yenilikçi tasarımı sayesinde uykunuzda bile rahatsız etmez.
- Verimli pil kullanımı sayesinde kesintisiz tedavi.



Uzman Personel Olmadan Kullanım Kolaylığı

- Hastaneden uzun süreli bakıma, ayakta tedavi ortamlarına veya evde bakıma uyarlanabilir.



Cilt Dostu

- Yara için bir vakum ortamını korurken, hastanın sağlıklı cildi için optimum nefes alabilirlik.
- Yarada hijyenik bir ortam yaratarak eksüda ve herhangi bir yara sıvısını emmek için kullanılan özel sünger sistemi.



Hareket Konforu

- Özel pansuman seti tedavi esnasında pansumanı sağlam tutarken aktif bir yaşam tarzı sağlamak için güçlü bir yapışkan bağ sağlar.
- Kompakt mobil yapısı ile kaliteli yaşam ve hareket konforu.

Daha Fazlası Hasta Konforu

PROFESYONEL KLİNİK TİP

HİBRİT TOPİKAL GAZLI VAKUM YARDIMLI YARA TEDAVİ CİHAZLARI

MEDIUM V2

Medium V2 Topikal Vakum Oksijen Tedavi Uygulamalı, Yıkamalı, Yara ve Yanık Tedavi Cihazı:

Bilinen vakum yardımcı kapama pansumanlarından farklı olarak, kompleks bir sistem ve tedavi şeklidir. Vakum altında yaraya hem oksijen gaz terapisi hem de oksijenli bidistile su ile yıkama ve nemlendirme uygulanmasına olanak verir. Böylelikle yara odağına verdiği oksijen ile birlikte iyileşme sürecini hızlandırır. Organik fonksiyonların yeniden canlanmasını ve hücresel boyutta bağışıklık sisteminin devreye girmesini sağlar.

Yara odağına verdiği oksijeni, özel yara kapama setleri sayesinde doğrudan hücreye difüze ettirerek hücresel boyutta iyileşme sürecini hızlandırır, bakterilerin ve mikroorganizmaların üremesini engeller ve yara bölgesindeki lökosit aktivasyonu güçlendirmesine yardımcı olur. Bu yönüyle klasik VAC sisteminden çok daha etkin ve hızlı iyileşme sunar.

MEDIUM KLİNİK V4 HİBRİT YARA TEDAVİ CİHAZI

Medium Klinik V4 Topikal Vakum Oksijen, Ozon Tedavi Uygulamalı, Yıkamalı, Elektrostimülasyonlu, Yara ve Yanık Tedavi Cihazı:

Oksijen & ozon gaz terapi, nemlendirme, hem oksijen & ozon hem de hekimin seçeceği herhangi bir ilaç ile yara yıkama özelliklerinin yanında tens terapi (Elektrostimülasyon) özellikleri de olan bir sistemdir.

Yanıklar ve her türlü açık yaraların tedavisinde kullanılmak üzere hem klasik vakum yapıp yara üzerinde SUB atmosferik basınç sağlamaya ve kapama setine negatif basınç oluşturmaya hem de yaranın hızlı iyileşmesi için gerekli oksijen, ozon ve nemi oluşturmaya, yara yıkamaya yarayan gelişmiş bir cihaz ve yara kapama setlerinden oluşmaktadır. **Bütün fonksiyonlar vakum altında iken yapılır.**

Bu kompleks sistem, dünyada ilk ve tek olup yarada klasik VAC tedavisine göre çok daha hızlı iyileşme sağladığı kanıtlanmıştır.


- Yara odağına verdiği oksijen ile birlikte iyileşme sürecini hızlandırır,
- Ozon gazı sayesinde enfeksiyonu yok eder ve re-enfeksiyonu önler,
- Cilt, cilt altı dokuları ve derin kas gruplarını yüksek frekanslı elektriksel uyarılarla aktive edilmesi esasına dayanan elektrostimülasyon özelliği sayesinde yaradaki ve kas dokusundaki iyileşme sürecini hızlandırır ve ağrıyı azaltır.

TOPIVAC CİHAZ FONKSİYON KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

TEDAVİ METODLARI	Vakum	Aralıklı & Artan Vakum	Yara Yıkama	Yıkama Türü	Nemlendirme	Gaz Terapi	Tens
TOPI A100 KLASİK 	+	-	-	-	-	-	-
TOPI A200 İNSIZYON 	+	-	-	-	-	-	-
HAND T-NPWT KLASİK 	+	+	-	-	-	-	-
HAND T-NPWT YIKAMALI 	+	+	+	Bidistile Su	+	-	-
MEDIUM V2 	+	+	+	O ₂ 'li Bidistile Su	+	O ₂	-
MEDIUM KLİNİK V4 	+	+	+	O ₂ & O ₃ Bidistile Su	+	O ₂ & O ₃	+

TOPIVAC İLE TEDAVİ EDİLEBİLEN YARALAR

Çalışma Prensibi

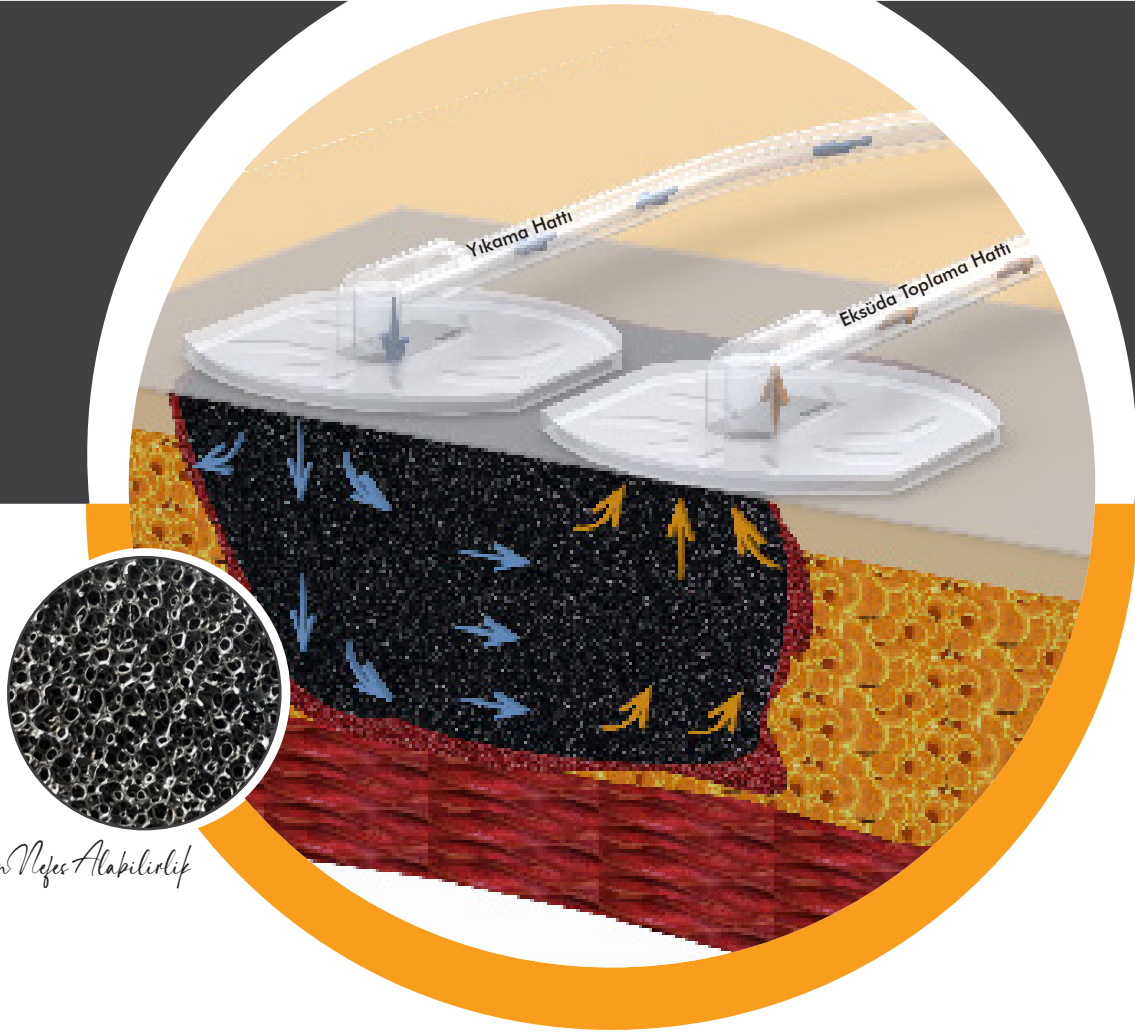

Diabetik Ayak Yarası



Plastik Cerrahi Yaraları



Kronik Yara



Bası/Yatak Yarası



Sezaryen Yaraları



İnsizyon Yaraları



Venöz Ülser



Enfekte Yaralar



Yanık Yarası



**Kardiyotorasik & Vasküler
Cerrahi Yaraları**



**Obstetrik & Jinekolojik
Cerrahi Yaraları**



**Ortopedik
Cerrahi Yaraları**

TEDAVİ EDİLEN KLİNİK VAKA ÖRNEKLERİMİZ

Sünger Altında TopiVac ile Ozon Terapi

Tedavi Öncesi



6 Saat Sonra



Vakum Altı O₂ (Oksijen) + O₃ (Ozon) Vakum Terapi

Tedavi Öncesi



6 Seans Sonra



Vakum + O₂ Gaz + O₂'li Bidistile Su ile Yara Yıkamalı Terapi

Tedavi Öncesi



36 Gün Sonra



Vakum + O₂ Gaz + O₃'lü Bidistile Su ile Yara Yıkamalı Terapi

Tedavi Öncesi



6 Gün Sonra



Vakum + Ozon Gazı ile Yara Terapi

Tedavi Öncesi



Tedavide



3 Seans Sonra



Yarada %50 - %70 Daha Hızlı İyileşme

TOPIVA® TOPICAL
VACUUM
TREATMENT
UNIT
WOUND CARE



topi.vac



Topivac NPWT



TopiVac Advanced Wound Care



TopiVac - @topivacwoundcare



+90 (312) 354 60 40



info@amedus.com



www.topivac.com



Ostim OSB Mah. 100. Yıl Blv No: 99/34

Yenimahalle 06374 Ankara/Türkiye

